


Микропипетки для ИКСИ SlimLine


Микропипетка
Humagen Slim Line

Стандартная ICSI
микропипетка

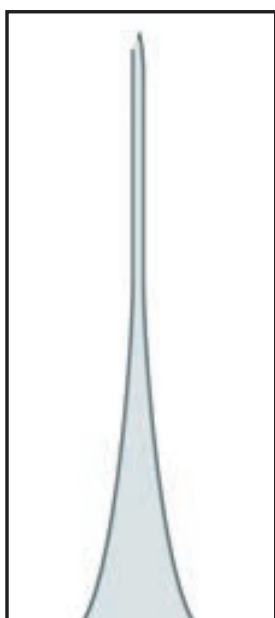

Преимущества:

- Тонкое плечо постоянного на всём протяжении диаметра
- Жесткость плеча обеспечивает лёгкость иммобилизации сперматозоидов и четкий контроль «прорыва» мембраны яйцеклетки
- Минимизация повреждения ооцита за счет более тонкого отверстия вкола: меньшее количество цитоплазмы аспирируется, меньший объем среды попадает в клетку
- Длина плеча позволяет проводить серийную иммобилизацию и аспирацию сперматозоидов («Турбо-ИКСИ»)

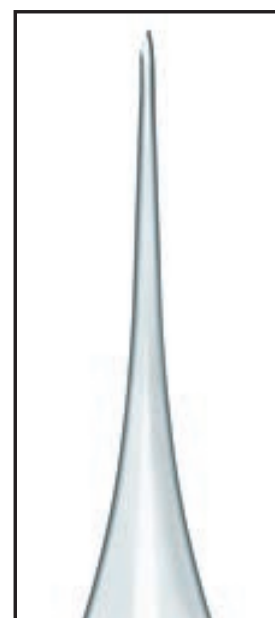

Общие характеристики

- Наличие спайка облегчает прокол оболочки и снижает вероятность повреждения ооцита
- Специальная обработка капилляра способствует его лёгкой установке и меньшему повреждению силиконовых прокладок держателя микропипеток
- Повышенное содержание кремния в боросиликатном стекле снижает вероятность «залипания» сперматозоида внутри микропипетки
- Возможность любых модификаций длины плеча, угла наклона, длины спайка, длины среза по желанию эмбриолога

По всем вопросам обращаться к эксклюзивному дистрибьютору в России – ООО «ОРИДЖИО»
196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40/4, бизнес центр «Технополис»,
тел/факс: +7 (812) 318 02 90, e-mail: info-ru@origio.com, www.origio.ru



ICSI SlimLine

«Новые микропипетки SlimLine созданы для оптимизации и усовершенствования процедуры ICSI, я восхищен всеми аспектами этого продукта.»

Nicholas Yun, руководитель лаборатории ЭКО в Princeton IVF

«Микропипетки SlimLine позволяют экономить время для проведения ICSI в среднем на 30% за счет иммобилизации сразу нескольких сперматозоидов.»

Harold Rodriguez, PhD, руководитель лаборатории BPT Fertility & Genetics

«Дизайн новых ICSI SlimLine пипеток обеспечивает крайне мягкую инъекцию, которая практически исключает вероятность повреждения ооцита.»

Marlena Duke, Msc, руководитель лаборатории эмбриологии, RMA, New York

Микроинструменты HUMAGEN:

- 19 лет опыта в создании микроинструментов для ЭКО
- Полная автоматизация производства – доля брака менее $1 \cdot 10^{-6}$
- Каждая микропипетка проходит неоднократную проверку на соответствие качеству и спецификации
- Использование в производстве обработанного боросиликатного стекла, проверенного тестами на содержание эндотоксина (LAL-тест, < 20 единиц эндотоксина на продукт), эмбриотоксичность (MEA тест, $> 70\%$ экспандированных бластоцист), стерильность (SAL, $1 \cdot 10^{-6}$)
- Стерилизация γ -излучением
- Сертифицировано CE и FDA
- ISO13485
- Сертификат качества для каждого лота продукта доступен на www.origio.com
- Декларация соответствия РОСС US.ИМ28.Д00392 от 07.09.2011
- Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/01522 от 07 октября 2010г.

Информация для заказа

Кат.№	Длина среза	Внутренний диаметр	Длина плеча
MIC-SLM-(угол)*	10-12 мкм	4,3-4,9 мкм	0,5 мм
MIC-SLM-(угол)*-B1.0	10-12 мкм	4,3-4,9 мкм	1,0 мм
* Доступен широкий выбор углов плеча: 0° , 15° , 20° , 25° , 30° , 35° , 40° , 45°			

По всем вопросам обращаться к эксклюзивному дистрибьютору в России – ООО «ОРИДЖИО»
196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40/4, бизнес центр «Технополис»,
тел/факс: +7 (812) 318 02 90, e-mail: info-ru@origio.com, www.origio.ru



a CooperSurgical Company