



Катетери  
та

Голки

Designed  
for  
choice

origio  
for life

# ПОВНИЙ СПЕКТР КАТЕТЕРІВ

## М'ЯКІ




### М'які катетери

- Катетер без підтримки для кращого маніпулювання та пластичності зовнішнього катетера
- Гладенький закруглений наконечник внутрішнього і зовнішнього катетера для атравматичного проходження через цервікальний канал
- Чітке маркування для визначення глибини та місця розташування
- Наявні з наконечниками EchoGen™ довжиною 20 см та 23 см
- М'який формований стилет не заважає руху зовнішнього катетера



Класичний хаб

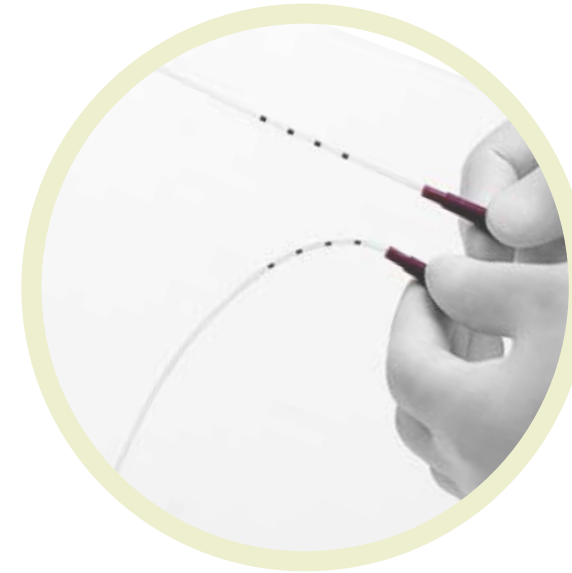

## З ПІДТРИМКОЮ



### Катетери з підтримкою

- Виготовлені з пластика замість сталі для зниження втрати температури, яка впливає на розвиток ембріона
- Пластикові канюля катетера є формованою для сприяння легкого введення
- М'який формований стилет не заважає руху зовнішнього катетера
- Наявні з наконечниками EchoGen™ довжиною 20 см та 23 см

## З ФІКСОВАНИМ КУТОМ



### Катетери з кутовим наконечником

- Кутовий наконечник 2 см від кінця зовнішнього катетера для сприяння легкого введення
- Включає цервікальний обмежувач
- Металева підтримуюча канюля для кращого контролю
- Нові хаби, придатні для під'єднання шприців, а також для максимізації точності та контролю, для зручного тримання та захоплення при проведенні ембріотрансферу
- Наявні з обтюратором та без
- Наявні з наконечниками EchoGen™ для проведення ЕТ під контролем УЗД



Новий хаб



## ЗІ СФЕРИЧНИМ НАКОНЕЧНИКОМ



### Катетери зі сферичним наконечником

- Гладенький закруглений наконечник катетера для атравматичного проходження через цервікальний канал
- Нові хаби, придатні для під'єднання шприців, а також для максимізації точності та контролю, для зручного тримання та захоплення при проведенні ембріотрансферу
- Кутовий катетер для сприяння легкого введення
- Включає цервікальний обмежувач
- Металева підтримуюча канюля для кращого контролю
- Наявні з наконечниками EchoGen™ для проведення ЕТ під контролем УЗД

СПЕКТР КАТЕТЕРІВ TRANSEM

| Номер за каталогом                 |  | Назва катетерів               |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| М'ЯКІ КАТЕТЕРИ                     |  |                               |
| TSET20C                            |  | TRANSEM SOFT 20CM             |
| TSET23C                            |  | TRANSEM SOFT 23CM             |
| КАТЕТЕРИ З ПІДТРИМКОЮ              |  |                               |
| TSET20S                            |  | TRANSEM SUPPORT 20CM          |
| TSET23S                            |  | TRANSEM SUPPORT 23CM          |
| КАТЕТЕРИ З КУТОВИМ НАКОНЕЧНИКОМ    |  |                               |
| TSET25SA                           |  | TRANSEM ANGLED 25CM           |
| TSET25SAO                          |  | TRANSEM ANGLED O 25CM         |
| КАТЕТЕРИ ЗІ СФЕРИЧНИМ НАКОНЕЧНИКОМ |  |                               |
| TSET24SAS                          |  | TRANSEM SPHERICAL 24CM        |
| TSET24SASO                         |  | TRANSEM SPHERICAL O 24CM      |
| КАТЕТЕРИ ДЛЯ ПРОБНОГО ПЕРЕНОСУ     |  |                               |
| TSTT20S                            |  | TRANSEM TRIAL 20CM            |
| TSTT23S                            |  | TRANSEM TRIAL 23CM            |
| СТИЛЕТИ                            |  |                               |
| TSS1520                            |  | TRANSEM STYLET 15CM = 20CM ET |
| TSS1823                            |  | TRANSEM STYLET 18CM = 23CM ET |
| TSS2025                            |  | TRANSEM STYLET 20CM = 25CM ET |

СПЕКТР КАТЕТЕРІВ EchoGen™ ДЛЯ ЕТ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД



| Номер за каталогом                 |                           | Назва катетерів                          |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| М'ЯКІ КАТЕТЕРИ                     |                           |                                          |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TSET20CEG                          |                           | EchoGen™ SOFT 20CM                       |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TSET23CEG                          |                           | EchoGen™ SOFT 23CM                       |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| КАТЕТЕРИ З ПІДТРИМКОЮ              |                           |                                          |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TSET20SEG                          |                           | EchoGen™ SUPPORT 20CM                    |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TSET23SEG                          |                           | EchoGen™ SUPPORT 23CM                    |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| КАТЕТЕРИ З КУТОВИМ НАКОНЕЧНИКОМ    |                           |                                          |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TSET25SAEG                         |                           | EchoGen™ ANGLED 25CM                     |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TSET25SAOEG                        |                           | EchoGen™ ANGLED O 25CM                   |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| КАТЕТЕРИ ЗІ СФЕРИЧНИМ НАКОНЕЧНИКОМ |                           |                                          |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TSET24SASEG                        |                           | EchoGen™ SPHERICAL 24CM                  |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TSET24SASOEG                       |                           | EchoGen™ SPHERICAL O 24CM                |                                         |                                                                                             |         |         |         |         |
| TRANSEM<br>КАТ. НОМЕР              | EchoGen™<br>КАТ. НОМЕР    | ДОВЖИНА<br>ВНУТРІШНЬОГО<br>КАТЕТЕРА (ММ) | ДОВЖИНА<br>ЗОВНІШНЬОГО<br>КАТЕТЕРА (ММ) | TSTT20S                                                                                     | TSTT23S | TSS1520 | TSS1823 | TSS2025 |
| TSET20C<br>TSET23C                 | TSET20CEG<br>TSET23CEG    | 200<br>230                               | 130<br>160                              | ✓                                                                                           | ✓       | ✓       | ✓       |         |
| TSET20S<br>TSET23S                 | TSET20SEG<br>TSET23SEG    | 200<br>230                               | 130<br>160                              | ✓                                                                                           | ✓       | ✓       | ✓       |         |
| TSET25SA<br>TSET25SAO              | TSET25SAEG<br>TSET25SAOEG | 250<br>250                               | 197<br>197                              |                                                                                             |         |         |         | ✓<br>✓  |
| TSTT20S<br>TSTT23S                 |                           | 200<br>230                               | 130<br>160                              | Склад: поліпропілен, поліетилен і нержавіюча сталь<br>Контроль якості -Тестування: MEA, LAL |         |         |         |         |
| TSS1520<br>TSS1823<br>TSS2025      |                           | 200<br>230<br>250                        | 150<br>180<br>200                       |                                                                                             |         |         |         |         |



# ШИРОКИЙ ВИБІР ГОЛОК

## ЗВИЧАЙНІ

16G 17G 18G 30

Однопросвітні голки  
(зі звичайними та тонкими стінками)

- Потрійний зріз наконечника голки для уникнення надмірної кровотечі та пошкодження тканин
- Тригранний зріз для кращої гостроти, з ехоміткою
- Зламостійка трубка із зазначення діаметру голки
- Більш гнучкі матеріали
- Ергономічна ручка
- Ехомітка на кінці голки для забезпечення точності розташування




Ручка  
однопросвітної  
голки

## ЖОРСТКІ

16G 17G 30

Однопросвітні голки  
(з міцними стінками)

- Жорсткі голки для кращого контролю
- Покращене ехомаркування для кращої видимості при проведенні аспірації під контролем УЗД
- Потрійний зріз наконечника голки для уникнення надмірної кровотечі та пошкодження тканин
- Зламостійка трубка із зазначення діаметру голки
- Спеціально розроблена ручка для кращого контролю протягом аспірації

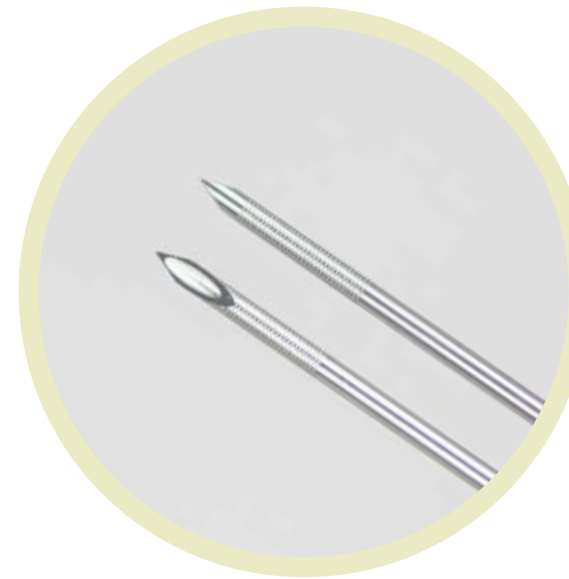

## SINGLE LUMEN 3 ПЕРЕМИКАЧЕМ ДЛЯ ФЛАШИНГУ

17G 30

Однопросвітні голки з краном  
(зі звичайними, міцними та тонкими стінками)

- Тристоронній кран для аспірації та флашингу
- Зламостійка трубка із зазначення діаметру голки
- Наявні у діаметрі 17G зі звичайними, міцними та тонкими стінками




Ручка  
двопросвітної  
голки

## DOUBLE LUMEN 3 УЛЬТРАЗВУКОВОЮ ПОЗНАЧКОЮ

16G 35

Двопросвітні голки  
(зі звичайними стінками)

- Ехомітка на кінці голки для забезпечення точності розташування
- Наконечник внутрішньої голки співпадає з наконечником зовнішньої
- Потрійний зріз наконечника голки для уникнення надмірної кровотечі та пошкодження тканин
- Зламостійка трубка із зазначення діаметру голки
- Спеціально розроблена ручка для кращого контролю протягом аспірації

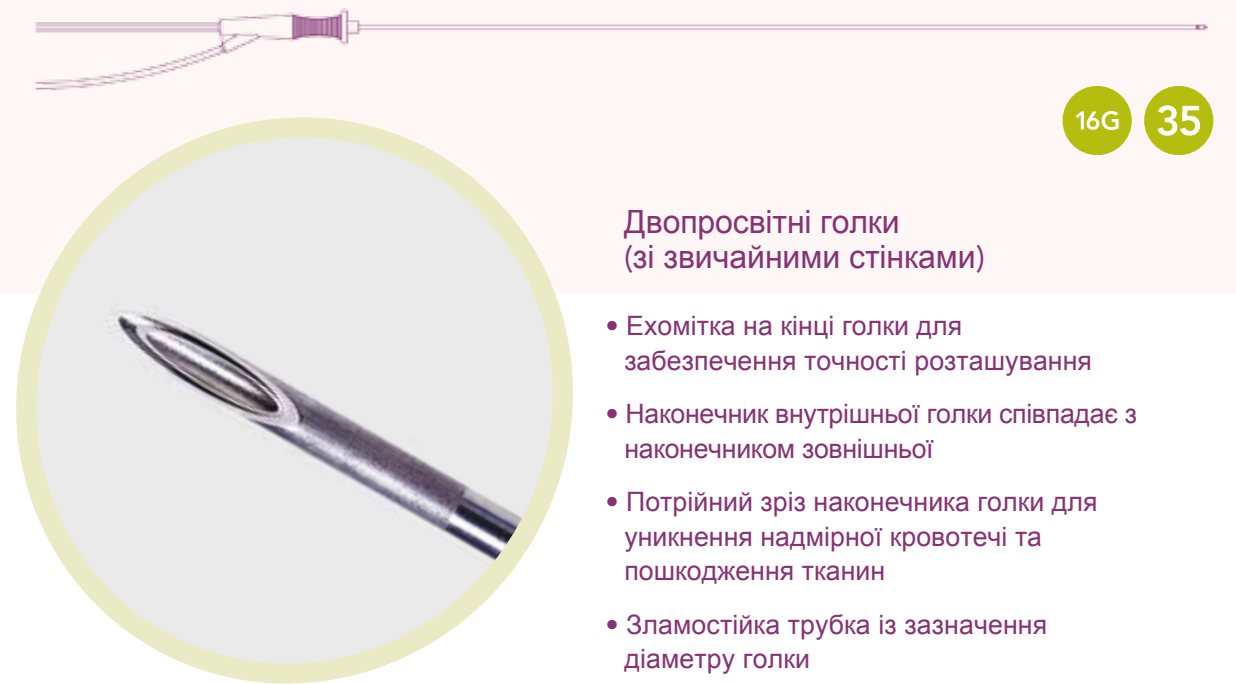

16G 17G 18G Діаметр голки

30 35 Довжина голки(см)

origio

Однопросвітні голки

| Кат.номер | ОПИС | GAUGE<br>(Ø) | NEEDLE<br>DIAMETER<br>OD (MM) | NEEDLE<br>LENGTH<br>(MM) | ASPIRATION<br>TUBE (CM) | SUCTION<br>TUBE<br>(CM) | STOPCOCK |
|-----------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
|-----------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|


THIN WALL TYPE NEEDLE

|            |                             |    |     |    |     |     |           |
|------------|-----------------------------|----|-----|----|-----|-----|-----------|
| SL1603011  | OOCYTERS16G N30-A100-S100   | 16 | 1.6 | 30 | 100 | 100 | NO        |
| SL1603014  | OOCYTERS16G N30-A100-S040   | 16 | 1.6 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1603014L | OOCYTERS16G N30-A100-S040L* | 16 | 1.6 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1603064  | OOCYTERS16G N30-A060-S040   | 16 | 1.6 | 30 | 60  | 40  | NO        |
| SL1603044  | OOCYTERS16G N30-A040-S040   | 16 | 1.6 | 30 | 40  | 40  | NO        |
| SL1703011  | OOCYTERS17G N30-A100-S100   | 17 | 1.5 | 30 | 100 | 100 | NO        |
| SL1703014  | OOCYTERS17G N30-A100-S040   | 17 | 1.5 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1703014L | OOCYTERS17G N30-A100-S040L* | 17 | 1.5 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1703064  | OOCYTERS17G N30-A060-S040   | 17 | 1.5 | 30 | 60  | 40  | NO        |
| SL1703044  | OOCYTERS17G N30-A060-S040   | 17 | 1.5 | 30 | 40  | 40  | NO        |
| SL1703011M | OOCYTERSS17G N30-A100-S100M | 17 | 1.5 | 30 | 100 | 100 | IN MIDDLE |

REGULAR WALL TYPE NEEDLE

|            |                              |    |     |    |     |     |           |
|------------|------------------------------|----|-----|----|-----|-----|-----------|
| SL1753011  | OOCYTERS175G N30-A100-S100   | 17 | 1.4 | 30 | 100 | 100 | NO        |
| SL1753014  | OOCYTERS175G N30-A100-S040   | 17 | 1.4 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1753014L | OOCYTERS175G N30-A100-S040L* | 17 | 1.4 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1753064  | OOCYTERS175G N30-A060-S040   | 17 | 1.4 | 30 | 60  | 40  | NO        |
| SL1753044  | OOCYTERS175G N30-A040-S040   | 17 | 1.4 | 30 | 40  | 40  | NO        |
| SL1753011N | OOCYTERSS175G N30-A100-S100N | 17 | 1.4 | 30 | 100 | 100 | AT NEEDLE |
| SL1753014N | OOCYTERSS175G N30-A100-S040N | 17 | 1.4 | 30 | 100 | 40  | AT NEEDLE |
| SL1753011B | OOCYTERSS175G N30-A100-S100B | 17 | 1.4 | 30 | 100 | 100 | AT BUNG   |
| SL1753014B | OOCYTERSS175G N30-A100-S040B | 17 | 1.4 | 30 | 100 | 40  | AT BUNG   |
| SL1853011  | OOCYTERS185G N30-A100-S100   | 18 | 1.2 | 30 | 100 | 100 | NO        |
| SL1853014  | OOCYTERS185G N30-A100-S040   | 18 | 1.2 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1853064  | OOCYTERS185G N30-A060-S040   | 18 | 1.2 | 30 | 60  | 40  | NO        |
| SL1853044  | OOCYTERS185G N30-A040-S040   | 18 | 1.2 | 30 | 40  | 40  | NO        |

\* 14mm/15mm Ø test tubes.

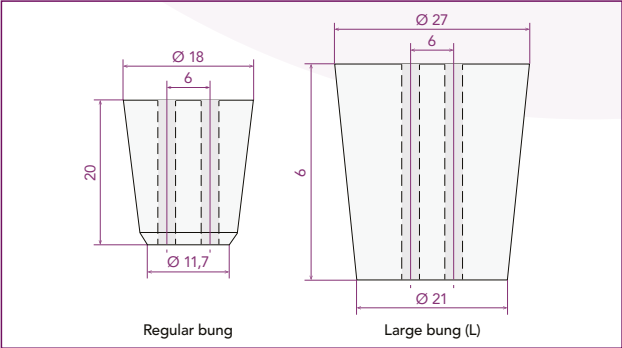

| Кат. номер | ОПИС | GAUGE<br>(Ø) | NEEDLE<br>DIAMETER<br>OD (MM) | NEEDLE<br>LENGTH<br>(MM) | ASPIRATION<br>TUBE (CM) | SUCTION<br>TUBE<br>(CM) | STOPCOCK |
|------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
|------------|------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|

STIFF WALL TYPE NEEDLE

|             |                              |    |      |    |     |     |           |
|-------------|------------------------------|----|------|----|-----|-----|-----------|
| SL1603011S  | OOCYTERS16G N30-A100-S100 S  | 16 | 1.64 | 30 | 100 | 100 | NO        |
| SL1603014S  | OOCYTERS16G N30-A100-S040 S  | 16 | 1.64 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1603014LS | OOCYTERS16G N30-A100-S040L S | 16 | 1.64 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1603064S  | OOCYTERS16G N30-A060-S040 S  | 16 | 1.64 | 30 | 60  | 40  | NO        |
| SL1603044S  | OOCYTERS16G N30-A040-S040 S  | 16 | 1.64 | 30 | 40  | 40  | NO        |
| SL1703011S  | OOCYTERS17G N30-A100-S100 S  | 17 | 1.47 | 30 | 100 | 100 | NO        |
| SL1703014S  | OOCYTERS17G N30-A100-S040 S  | 17 | 1.47 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1703014LS | OOCYTERS17G N30-A100-S040L S | 17 | 1.47 | 30 | 100 | 40  | NO        |
| SL1703064S  | OOCYTERS17G N30-A060-S040 S  | 17 | 1.47 | 30 | 60  | 40  | NO        |
| SL1703044S  | OOCYTERS17G N30-A040-S040 S  | 17 | 1.47 | 30 | 40  | 40  | NO        |
| SL1703011MS | OOCYTERSS17G N30-A100-S100MS | 17 | 1.47 | 30 | 100 | 100 | IN MIDDLE |
| SL1703011NS | OOCYTERSS17G N30-A100-S100NS | 17 | 1.47 | 30 | 100 | 100 | AT NEEDLE |
| SL1703014NS | OOCYTERSS17G N30-A100-S040NS | 17 | 1.47 | 30 | 100 | 40  | AT NEEDLE |
| SL1703011BS | OOCYTERSS17G N30-A100-S100BS | 17 | 1.47 | 30 | 100 | 100 | AT BUNG   |
| SL1703014BS | OOCYTERSS17G N30-A100-S040BS | 17 | 1.47 | 30 | 100 | 40  | AT BUNG   |

Двопросвітні голки

REGULAR WALL TYPE NEEDLE

|            |                                |    |     |    |     |     |     |
|------------|--------------------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| DL16035111 | OOCYTERD16G N35-A100-S100-F100 | 16 | 1.6 | 35 | 100 | 100 | 100 |
| DL16035141 | OOCYTERD16G N35-A100-S040-F100 | 16 | 1.6 | 35 | 100 | 40  | 100 |
| DL16035641 | OOCYTERD16G N35-A060-S040-F100 | 16 | 1.6 | 35 | 60  | 40  | 100 |



**ORIGIO a/s**

Knardrupvej 2  
DK-2760 Måløv  
Denmark

Tel: +45 46 79 02 00  
Fax: +45 46 79 03 00

**ORIGIO.com**

Уповноважений представник в Україні

ПП "МедіТА"  
вул. Васильківська 14, оф.420  
Київ 04040

Телефон: (044)587 96-81  
(044) 587 87-82  
Факс: (044) 206 24-26  
E-mail [mta@treatment.kiev.ua](mailto:mta@treatment.kiev.ua)